


# DERMATOMOS Y HOJAS

“WATSON-COBBET-BRAITHWAITE”

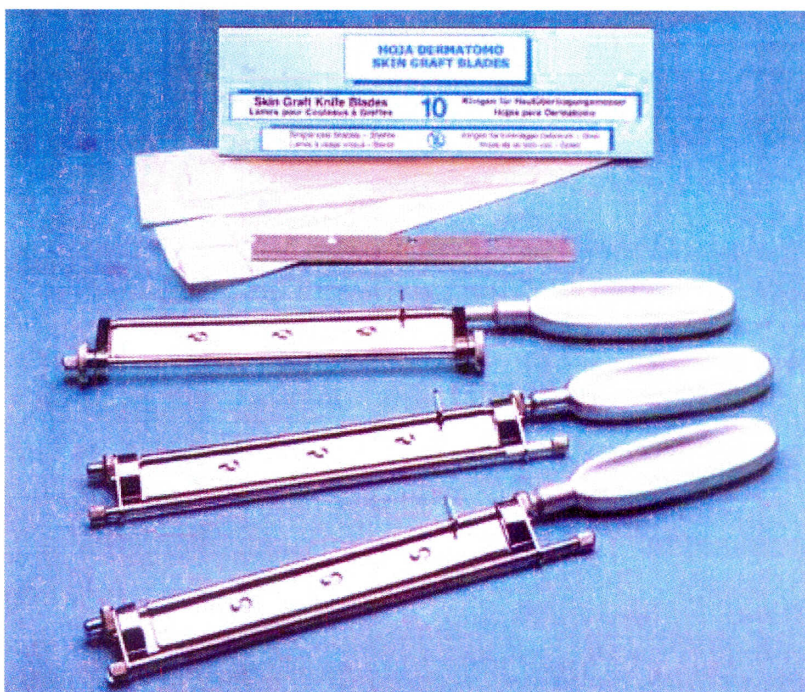

## DERMATOMO MANUALES

### 24.00.01

#### WATSON:

Es el más popular de los tres. Tiene una varilla fija que se desliza suavemente sobre la piel. Se regula la profundidad del corte ajustándolo desde 0.1mm a 1.0mm por mediación de dos tornillos de ajuste, uno en cada extremo de la hoja, lo cual permite una gran precisión en obtener un corte paralelo a la varilla en toda su longitud.

### 24.00.02

#### COBBETT:

Dispone de una varilla fija. El espesor del corte puede regularse de 0.1mm a 1.0mm. Tiene dos tornillos de ajuste, uno en cada extremo, que le dan una sección de corte muy paralela en toda la longitud de la varilla.

### 24.00.03

#### BRAITHWAITE:

Dispone de una varilla que gira sobre sí misma al deslizarse sobre la piel. El espesor del corte puede regularse de 0.1mm a 1.0mm. Tiene dos tornillos de ajuste, uno en cada extremo, que le dan una sección de corte muy paralela en toda la longitud de la varilla.



HOJA DERMATOMO

## Dimensiones y medidas:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Largo	Ø Ext.	Ø Int.	CAJA
<b>DERMATOMOS MANUALES</b>					
24.00.01	DERMATOMO MODELO WATSON	303mm	30mm	115mm	1
24.00.02	DERMATOMO MODELO COBBET	303mm	30mm	115mm	1
24.00.03	DERMATOMO MODELO BRAITHWATE	303mm	30mm	115mm	1
<b>HOJAS PARA DERMATOMO</b>					
24.01.01	HOJA PARA DERMATOMO "FEATHER"	157mm x 18mm x 0.25mm			20

**Presentación:** Dermatomo por unidades.

Hojas dermatomo envasadas individualmente y estériles. Cajas de 20 unidades.